


fasciotens® Abdomen

# Guía rápida



**Consejo:**  
Fije la guía rápida cerca  
del paciente como  
fuente de información  
para el equipo médico.

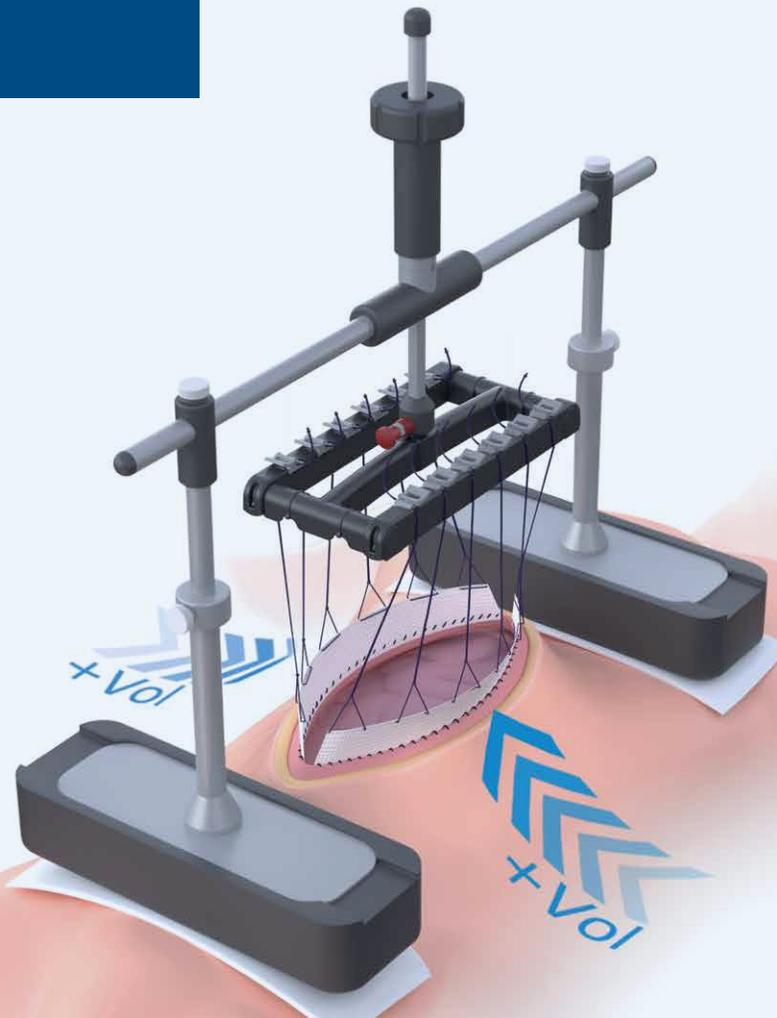



**fasciotens**  
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

## Estructura del producto

⚠ Antes de cada nueva instalación, girar hacia arriba el volante negro hasta que quede enrasado con el capuchón terminal.

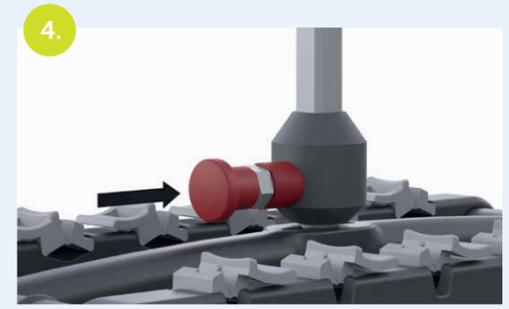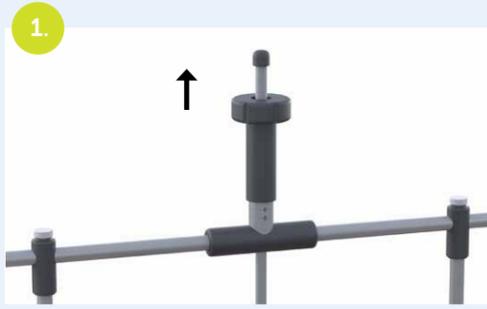

## Ajuste de altura y de longitud (opcional)

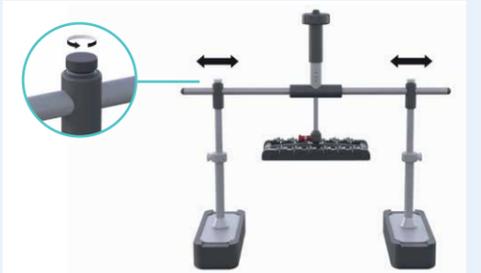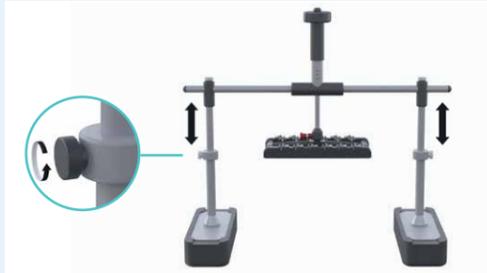

## Regulación de la fuerza de tracción







⚠ Gire el volante negro para ajustar la fuerza de tracción.




⚠ Compruebe periódicamente la fuerza de tracción y ajústela, si es necesario, hasta que se encuentre en el intervalo definido previamente.

## Tensado inicial de los hilos

⚠ Verificar que todos los hilos tienen la tensión básica. En su caso, puede ser necesario retensar algunos de ellos.

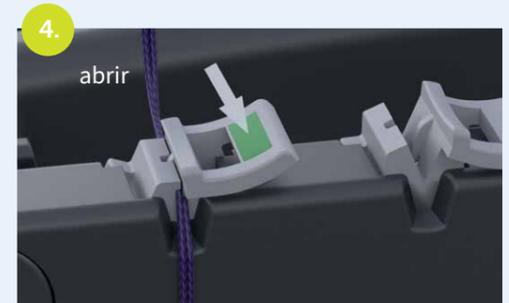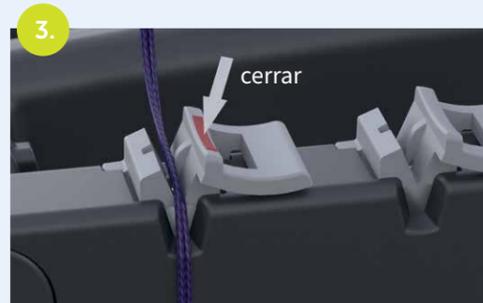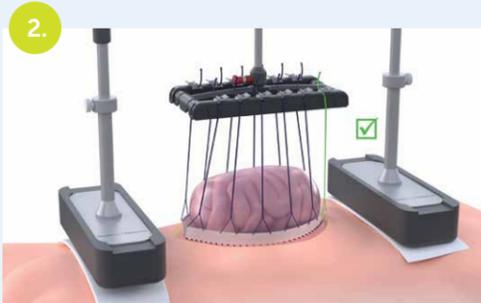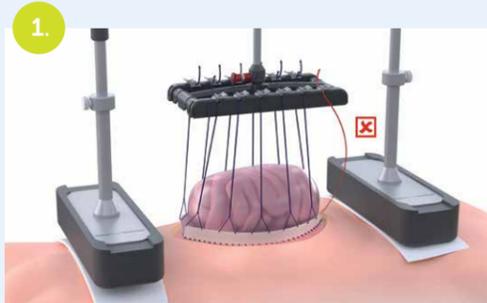

## Desmontaje en el cuidado diario (y para emergencias)

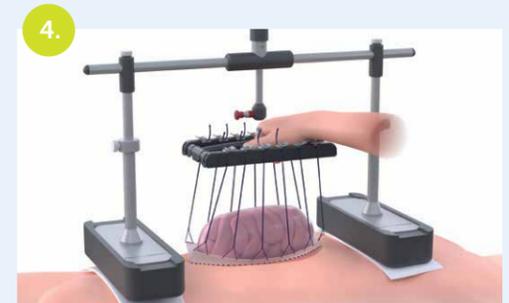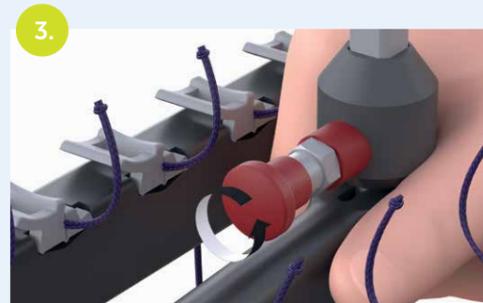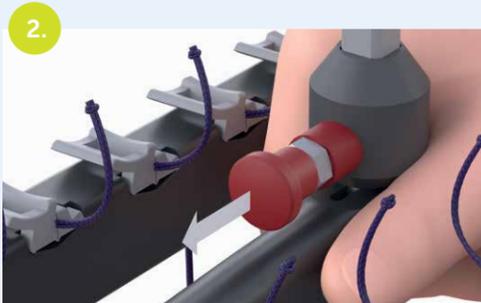

Sujete el soporte para hilos con una mano.

Tire del pasador de bloqueo rojo hacia fuera.

Gírelo 90°.

El soporte para hilos se suelta y puede retirarse tirando de él hacia abajo.

## ⚠ Indicaciones de seguridad adicionales

Las superficies de apoyo se colocarán exclusivamente sobre piel intacta.

Verifique que debajo de las superficies de apoyo no haya cuerpos extraños enganchados, p. ej., cables, electrodos, tubos, etc.

Debajo de las superficies de apoyo, coloque siempre compresas absorbentes grandes o materiales similares que no formen pliegues.

El producto no debe colocarse sobre la zona genital.

Para evitar irritaciones de la piel, se recomiendan intervalos de aproximadamente 5 horas de tracción seguidos de una pausa de tracción de 1 hora.

Videotutorial



**fasciotens**  
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

¡Consultar siempre el manual de uso!

# fasciotens

ABDOMINAL WALL SOLUTIONS



**fasciotens GmbH**

Moltkeplatz 1

D-45138 Essen | Germany

**[www.fasciotens.de](http://www.fasciotens.de)**

[info@fasciotens.de](mailto:info@fasciotens.de)

Tel. +49 221 17738500

**Servicio de asistencia:**

[support@fasciotens.de](mailto:support@fasciotens.de)

Tel.: +49 221 17738500

**fasciotens GmbH**

Aachener Str. 1053-1055

D-50858 Colonia | Germany